

iPexII



MODELLO : **iPexII Set completo**

CODICE : **NK0031PX2**

Contenuto

- Unità di controllo
- iPexII Sonda (1.8m)
- Clip (3 pz)
- Gancio per labbro (3 pz)
- Batterie AAA (3pz)

Specifiche

- Potenza : Per batterie 1.5VAAA (LR03 o R03)
- Uso continuato : 60h circa
- Dimensioni : L60 x P60 x H86 (mm)
- Peso : Unità 76g (senza batterie)

Componenti di ricambio

PRODOTTO	CODICE	PRODOTTO	CODICE
	iPexII Clip NK00310NL		iPexII Sonda NK00310NS
	iPexII Tester U1109353		Gancio per labbro NK00310NG

Prodotti NSK correlati



ENDO-MATE TC2

Manipolo endodontico cordless leggero, compatto e ricaricabile.

Il nuovo sistema di allarme acustico e la funzione auto-reverse riducono i rischi di danneggiamento del canale.

Modello : ENDO-MATE TC2 (230V)
Codice : NK0030TC2



ENDO-MATE DT

Manipolo endodontico leggero, sottile ed ergonomico.

Grazie al design compatto e al sistema di alimentazione a batterie, Endo-Mate DT può essere utilizzato in diverse situazioni.

Modello : ENDO-MATE DT (230V)
Codice : NK0030003

- I prodotti ENDO-MATE e iPexII NSK garantiscono sicurezza, precisione ed efficienza durante ogni trattamento.



Rev.0_02/13 E.B.

NSK


iPexII

Advanced Apex Locator



 **DENTALICA**

20142 Milano - Via Rimini, 22
Tel. 02/895981 - Fax 02/89504249
dentalica@dentalica.com
www.dentalica.com

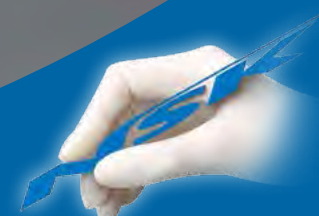

Powerful Partner®

iPexII Advanced Apex Locator

Partendo dai numerosi test clinici condotti, NSK ha creato **SmartLogic**, un rilevatore apicale di ultima generazione compatibile con diverse tipologie di dente e in grado di garantire estrema precisione nell'individuazione dell'apice.

Nella zona apicale, la zona di precisione, **iPexII** fornisce un'immagine chiara e precisa della posizione dello strumento.

Caratteristiche

- Misurazioni precise grazie all'innovativo dispositivo SmartLogic
- Rilevazione apicale precisa in ogni condizione del canale (asciutto o bagnato)
- Design moderno e compatto
- Tre diversi segnali acustici di allarme in base alla posizione dello strumento
- Monitor LCD a tre colori antiriflesso, che consente al clinico di monitorare le procedure con precisione e in tempo reale
- Risparmio energetico e tempi operativi ridotti




Dispositivo **SmartLogic** di ultima generazione

SmartLogic combina due tecnologie avanzate per analizzare i segnali in modo preciso ed accurato.

La tecnologia **SmartLogic** di **iPexII** rimuove potenzialmente tutte le interferenze presenti nel canale endodontico permettendo di localizzare in maniera precisa la posizione dell'apice.

- **iPexII SmartLogic** alterna due diverse frequenze per effettuare le misurazioni. Riducendo i rumori che interferiscono con l'analisi del segnale, genera un preciso sistema d'onde che non necessita di un circuito di filtraggio.
- **iPexII SmartLogic** utilizza l'intero sistema di onde per analizzare la frequenza estratta. Ciò garantisce una misurazione precisa e costante in ogni condizione del canale.

Monitor LCD a tre colori

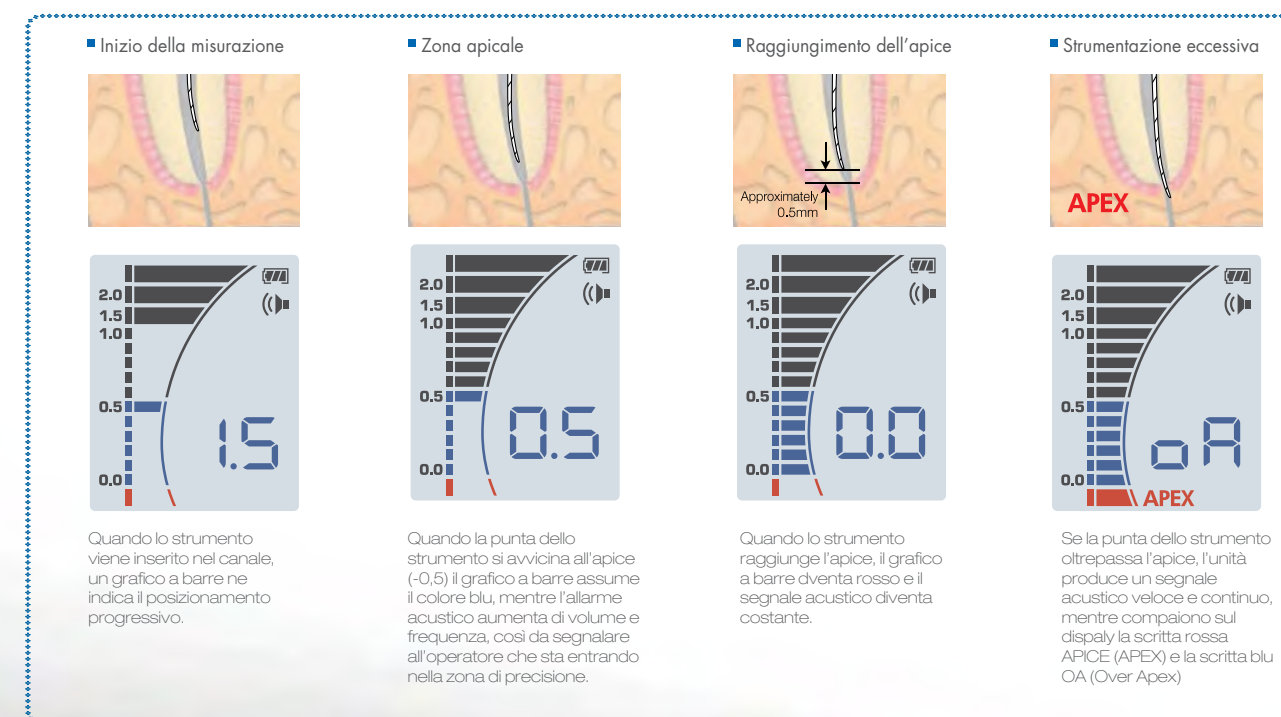

Design moderno e compatto

Leggero e con una base di soli 6 cm di diametro, **iPexII** può essere utilizzato in diverse situazioni. Il pannello LCD ha un'angolazione perfetta che consente al clinico di monitorare le condizioni in modo semplice, sicuro e senza distrazioni.



Il display è antiriflesso e facilmente visibile dalla distanza operativa, consentendo all'operatore di mantenere l'attenzione sul paziente.

