

PT-B

Five - in - One



PT-B

State-Of-Art nell'igiene dentale

PT- B sviluppa la tecnologia e i concetti già affermati sul territorio con il PT- A, delineando una nuovo orizzonte per la profilassi dentale: 12 i livelli di potenza settabili e 4 le differenti temperature dell'acqua impostabili.

PT-B implementa inoltre le migliori soluzioni ergonomiche e funzionali lato odontoiatra: pedale wireless, poggiamanipoli con identificazione ad induzione, servo motore per la regolazione del flusso aria-polvere, alimentatore integrato.



Air Polishing



Trattamento parodontale



Trattamento endodontico



Manutenzione Impianti



Conservativa




Schermo Ultra HD

Display touch screen da 1280x720, chiaro, semplice ed intuitivo. Massimo controllo minimo sforzo.



Doppia possibilità di approvvigionamento idrico:

Rete idrica o dispenser (600mL, 1400mL), aprendo la possibilità a soluzioni specifiche come clorexidina, perossido di idrogeno, ipoclorito, etc.

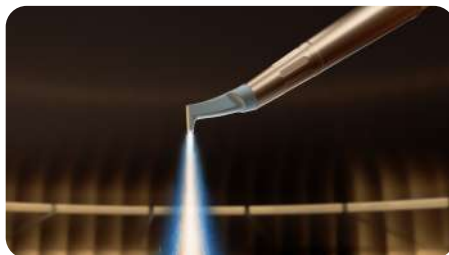

Design avanzato dei manipoli

Puro metallo, leggeri ed ergonomici garantiscono il corretto rapporto di miscelazione di acqua, aria e polvere.



Pedale wireless

Connessione Bluetooth 5.0 per una risposta super fedele ed immediata alle operazioni. La batteria interna al pedale permette un utilizzo fino a 72h.



Innovativo flusso aria polvere

Il nuovo flusso concentrico generato all'interno del dispenser-polveri, unito alla forma strutturale simmetrica ad imbuto, permette un flusso polvere più stabile ed efficiente.




Trattamento ultrasonico confortevole

Ablatore piezoelettrico dalla tecnologia indolore: vibrazioni ellittiche per disperdere la forza d'impatto tra la superficie dentale e la punta, così da garantire un ottimo comfort.



Manipoli studiati a tre sezioni, per aiutare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria. Consente un trattamento mini-invasivo ed efficace su macchie, biofilm e tartaro di recente formazione. Doppio manipolo in dotazione: AP-1 per le aree sopragengivali AP-2 per il lavoro sottogengivale.

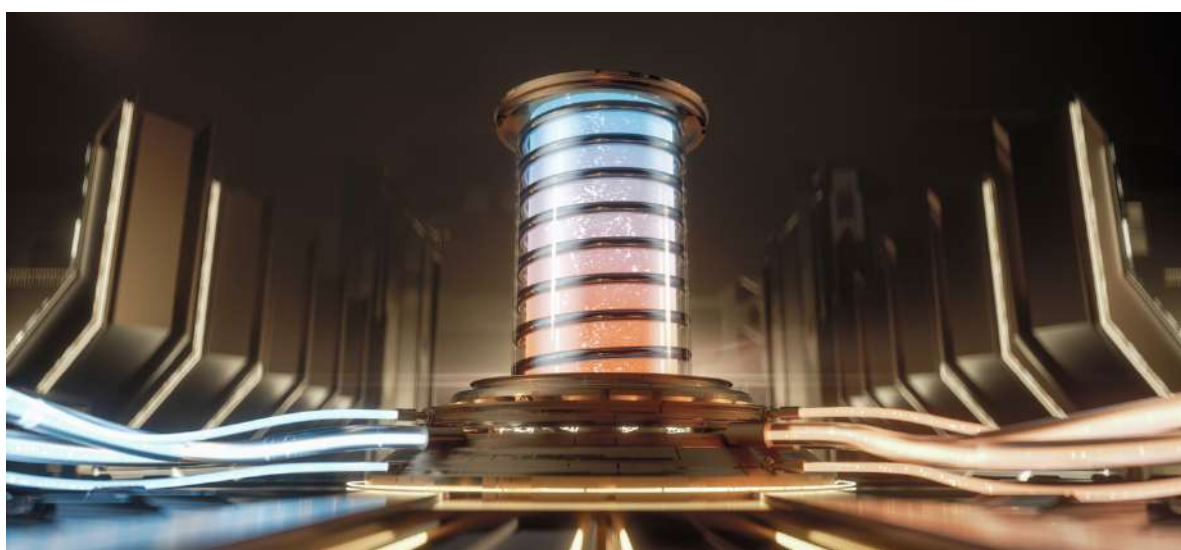

Nuovo innovativo sistema di controllo della temperatura:
300 W di potenza e fino a 4 impostazioni di temperatura (25°C, 30°C, 35°C, 40°C).



Ugello per la polvere di piccolo calibro (0,7mm) per un emissione più concentrata. Nessun danno ai tessuti molli, massima salvaguardia della superficie dentale.

L'ugello dell'acqua, di soli 1.4mm, è stato studiato per concentrare al meglio il flusso e minimizzare le dispersioni volatili di polvere.



Il manipolo sotto-gengivale utilizza delle tip dotate di tripla direzione d'uscita per le polveri e monomandata per l'acqua. Queste non solo permettono una pulizia a 360° della tasca paradontale, ma assicurano una velocità senza uguali al professionista, nonostante l'ampio comfort percepito dal paziente.

Specifiche tecniche

Prodotto esclusivo Five-in-One

Ablatore PT-B

~~€ 6.285,00~~
€ 4.399,00

Codice prodotto

562/00



Sistema air-polish:



Dotato di sistema
anti intasamento.



Micro-Ugello da
0,7 mm



Pulizia automatica dopo 5 minuti di inattività

Pedale wireless per un facile controllo



Connessione
Bluetooth 5.0



Durata 72 ore
di lavoro



Multifunzione



Potenza immediata per
le zone più difficili.

Mix di punte ultrasoniche

Punte titanio	P33x 2	P50L x 2	P50R x 2
	P56 x 2	P59x 2	
Punte pulizia impianto	P94 x 1	P95 x 1	
Punte endo	E60x 2		

Accessori in dotazione

Manipolo ablatore LED	x 2
Inserti ablatore in dotazione	x 14
Manipolo sbiancatore sopragengivale AP-1	x 1
Manipolo sbiancatore subgengivale AP-2	x 1
Puntali sottogengivali perio	x 10
Doppio serbatoio per H ₂ O	600 ml 1400 ml
Dispenser polveri	x 2
Pedale multifunzione	x 1
Box di sterilizzazione	x 2
Chiave dinamometrica	x 2
Polvere bicarbonato 65 µ	1x300gr
Polvere glicina 25 µ	1x125gr
Valigia di trasporto	x 1

Carrello PT-B

Esclusivamente progettato per il sistema
di profilassi Woodpecker PT-B

Compatto, pratico, maneggevole e sicuro.

- L'estetica pulita e funzionale, garantisce un'estrema facilità di pulizia.
- Massima ergonomia, manovrabilità.
- Provvisto di slot di stoccaggio per dispenser e polveri.

~~€ 700,00~~
€ 499,00

Codice prodotto

971/00

